

安心と使いやすさにスマートさをプラス

# ケアスロープ®

介護保険レンタル対象品

日本製



ケアメディックス株式会社




# 持ち運びが便利で、狭い間口・高い段差に簡単にスロープが設置できます。

## ポイント② メンテナンスが簡単・時短・低コスト!

### ポイント①

幅70cmだから  
狭い間口に対応!

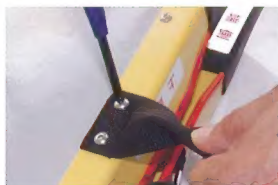

持ち手の交換は、ビス留め式なのでドライバーで交換できます。



すべり止めテープは、部分貼り式なので交換が必要な箇所だけ取り換えできます。補修部材を揃えているので、自社メンテナンスが可能です。



※写真はCS-65

※写真はCS-240C

### ポイント③

夜間の視認性もUP!



四隅に蛍光テープと反射テープを貼付し、暗い場所や降雨時の使用で濡れたアスファルトと黒いゴム部分の同化を防ぐことで視認性をたかめ安全に使用できます。

脱輪防止  
エッジの高さ  
2.5cm  
(全タイプ共通)

最大耐荷重  
300kg

コンパクトに折りたたため、自立して置ける!



12cm




全タイプ折りたたみ・自立するので、収納場所も選びません。

### ポイント④

最小回転で障害なく  
乗り入れができる!

下端部の脱輪防止エッジをあえてカットした為、フットサポートがエッジに当たらず障害なく最小半径で乗り入れが簡単にできます。

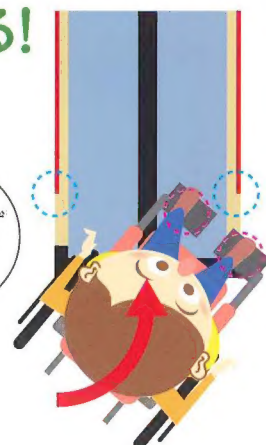



# ケアスロープ適応段差の目安



注意 ※段差にあったスロープでも、道路にはみ出すと危険です。

## 介助者なしで使用

自走可能な方におすすめ角度

品 番	ケアスロープの長さ	段 差
CS-65	65 cm	5 cm まで
CS-100	100 cm	8 cm まで
CS-120	120 cm	10 cm まで
CS-150	150 cm	13 cm まで
CS-175	175 cm	15 cm まで
CS-200	200 cm	17 cm まで
CS-240C	240 cm	20 cm まで

傾斜角度

5°



## 高齢者の方が介助

ケアスロープおすすめ角度

品 番	ケアスロープの長さ	段 差
CS-65	65 cm	9 cm まで
CS-100	100 cm	13 cm まで
CS-120	120 cm	16 cm まで
CS-150	150 cm	20 cm まで
CS-175	175 cm	24 cm まで
CS-200	200 cm	27 cm まで
CS-240C	240 cm	33 cm まで

傾斜角度

8°



## 健常者の方が介助

一般的角度

品 番	ケアスロープの長さ	段 差
CS-65	65 cm	11 cm まで
CS-100	100 cm	17 cm まで
CS-120	120 cm	20 cm まで
CS-150	150 cm	25 cm まで
CS-175	175 cm	30 cm まで
CS-200	200 cm	34 cm まで
CS-240C	240 cm	41 cm まで

傾斜角度

10°



## 通常に使用できる限界

品 番	ケアスロープの長さ	段 差
CS-65	65 cm	15 cm まで
CS-100	100 cm	24 cm まで
CS-120	120 cm	30 cm まで
CS-150	150 cm	37 cm まで
CS-175	175 cm	43 cm まで
CS-200	200 cm	50 cm まで
CS-240C	240 cm	60 cm まで

傾斜角度

15°



※車いすの種類や介助する方の体力等により適応範囲は変化します。上の表は目安としてお使いください。  
※段差に対して最低でも段差の6倍以上の長さのスロープをおすすめします。



## ケアスロープ規格表

品番	素材	長さ×幅	重さ	JANコード	TAISコード	希望小売価格+(税)
CS-65	繊維強化プラスチック アルミ	65cm x 70cm	約3kg	4958519500008	00093-000015	67,000円+(税)
CS-100	繊維強化プラスチック アルミ	100cm x 70cm	約5kg	4958519500015	00093-000016	83,000円+(税)
CS-120	繊維強化プラスチック アルミ	120cm x 70cm	約6kg	4958519500022	00093-000017	107,000円+(税)
CS-150	繊維強化プラスチック アルミ	150cm x 70cm	約8kg	4958519500039	00093-000018	118,000円+(税)
CS-175	繊維強化プラスチック アルミ	175cm x 70cm	約9kg	4958519500046	00093-000019	125,000円+(税)
CS-200	繊維強化プラスチック アルミ	200cm x 70cm	約10kg	4958519500053	00093-000020	136,000円+(税)
CS-240C	繊維強化プラスチック アルミ	240cm x 70cm	約12kg	4958519500060	00093-000021	230,000円+(税)

※折りたたみ時の厚さ：CS-65～CS-120/8cm、CS-150～CS-240C/10cm

最大耐荷重：300kg

## 使用方法


1.上端部を設置面に置いてください。



2.取っ手のボタンを外してパネルを  
ゆっくり広げてください。



3.設置面を上端に表示してい  
る「設置ライン」までかけてく  
ださい。

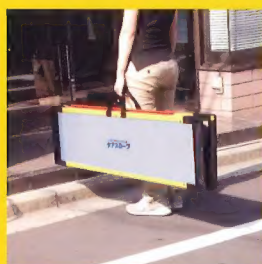

使い方も簡単だし、  
いろんな場面で使えるね!



注 意

《製品を正しく安全にお使いいただくために》

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

※このカタログは製品の性能、品質の全てについてご説明するものではありません。詳細につきましては当社または販売店までご相談ください。  
※このカタログの製品仕様及び内容は予告なく変更する場合があります。



ケアメディックス株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目23-1  
TEL:03-3837-0551 FAX:03-3837-0554  
<http://www.caremed.co.jp/>

取扱店